



Гибрид 755 +808 +940+1064нм
Лазерная Эпиляция

Диодный лазер

3

курса

= **Перманентная
эпиляция**


Лазерная эпиляция
Омоложение кожи



Модель FG2000D

Теория

Система удаления волос FG2000D использует теорию селективного поглощения света, нагревая стержень волоса и волосяной фолликул, чтобы разрушить волосяной фолликул и кислородную организацию вокруг волосяного фолликула, тем самым достигая цели постоянного удаления волос.

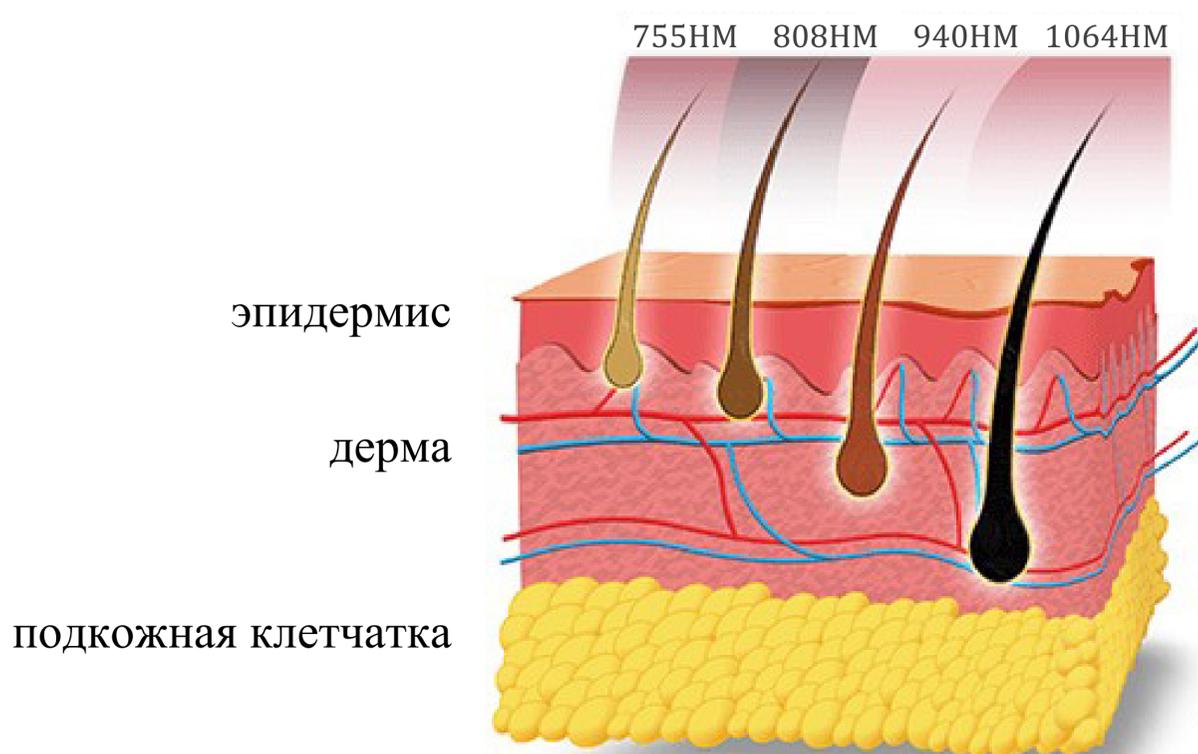

■ Длина волны

755 нм нацелена на выпуклость волосяного фолликула с более поверхностным проникновением и особенно эффективна для поверхностно встроенных волос в таких областях, как брови и верхняя губа.

808 нм обеспечивает глубокое проникновение в волосяной фолликул с высокой средней мощностью, высокой частотой повторения и большим размером пятна 2 см для быстрой обработки. Он имеет умеренный уровень поглощения меланина, что делает его безопасным для более темных типов кожи.

940 нм коагулирует микрососуды вокруг волосяного фолликула, перекрывая поступление питательных веществ к волосяным фолликулам, резко снижая мощность регенерации волос и полностью подавляя регенерацию волос.

1064 нм обеспечивает самое глубокое проникновение в волосяной фолликул, что позволяет воздействовать на луковицу и сосочек, а также обрабатывать глубоко укоренившиеся волосы в таких областях, как кожа головы, подмышки и лобковые области.

ОТЗЫВЫ



DR. Yulima



Я очень довольна.
Это мой 3-й лазер от ADSS
компании.
Надежный продавец. Очень
хорошее послепродажное
обслуживание, руководство по
эксплуатации и обслуживание.



DR. Antonio



У нас это клиника в Москве. Я купил и
использовал гибрид ЛАЗЕР ОТ ADSS, когда
появился первый гибрид на рынке.
В прошлом году я купил еще один 1600 Вт
диодный лазер, СУПЕР И МОЩНЫЙ с
замечательным результатом. ADSS
--пионером в области ЛАЗЕРНОЙ
ЭПИЛЯЦИИ.



DR. Julia



У меня лечение для всего
тела. Этому teclaser требуется
всего 20 минут, чтобы
получить удивительно
быстрое удаление волос и
комфортный опыт, система
удаления волос ADSS teclaser
замечательна



Технологические Преимущества

01 Рукоятка

- Размер пятна 12*16 мм обеспечивает большой охват и значительно сокращает время лечения
- Смешанный выход 755нм+808нм+940нм+1064 нм, разрушает волосяные фолликулы и перекрывает кровоснабжение волосяных фолликулов, предотвращает послеоперационные побочные эффекты и значительно повышает комфорт лечения.
- Высокая мощность 600 Вт обеспечивает максимальную безопасность и эффективность
- Зажигалка-аппликатор весит 0,5 кг.



02 Коническая насадка

- Коническая насадка упрощает удаление волос в ноздрях



Стоимость на процедуру

03 Интерфейс

- Интеллектуальная система защиты обеспечивает безопасную работу
- Значок 6 областей записывает номер съемки
- До 4 длин волн для постоянного и безопасного удаления любых типов волос на всех типах кожи.



Клиническая Дата



Женщина/Возраст 26
До

После
5 процедур
2021.08.10-2022.01.20

Мужчина/Возраст 39
До

После
4 процедуры
2021.08.08-2022.01.01



Спецификация

Тип лазера

755+808+940+1064НМ

Выходная мощность

2000Вт

Энергия

1-120Дж/см² регулируется

Размер пятен

12*16мм

Вес нетто

53.5кг